

F-100C
Mode d'emploi
WE-2013-F100C-2

VAPOZONE PORTABLE

VAPOZONE.COM

ADVERTISSEMENT

- N'utilisez que de l'eau distillée. Prenez garde lorsque vous utilisez des huiles essentielles ou des herbes à ne pas contaminer l'eau de vaporisation.

- N'orientez JAMAIS la vapeur vers le visage du client.

- N'utilisez JAMAIS l'appareil de vaporisation dans des lieux humides ou peu ventilés.

- N'utilisez JAMAIS le vaporisateur en milieu extérieur.

- Ne tentez JAMAIS d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.

- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

- Ne laissez pas le vaporisateur s'assécher. Cela annulera la garantie.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.





L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

- L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QUANTITÉ
1	F-100C	-	1
2	RÉSERVOIR D'EAU	10051	1
3	BUSE DE PULVÉRISATION	10089	1
4	EXTENSION BRAS 1	10090	1
5	EXTENSION BRAS 2	10094	1
6	COUVERCLE	-	1
7	FEUTRE DE LAINE	-	5
8	BAGUE D'ETANCHEITE 17,5X2	-	2
9	BAGUE D'ETANCHEITE 23X3	-	2

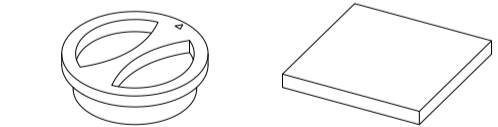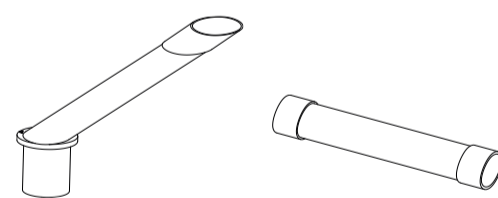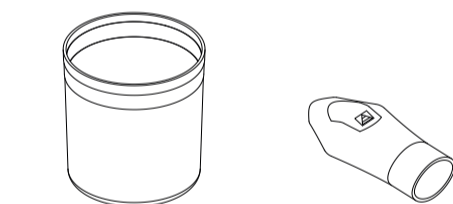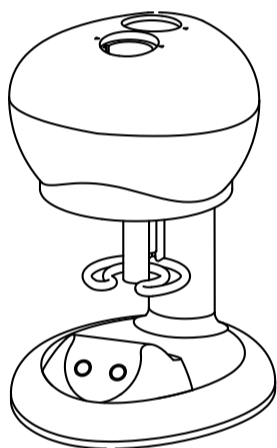


PANNEAU AVANT

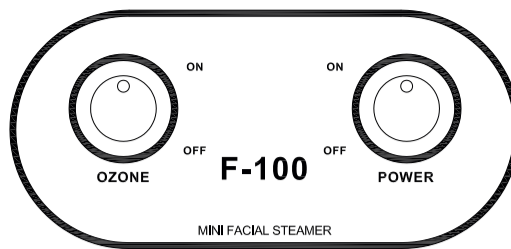

MODE D'EMPLOI

ASSEMBLAGE

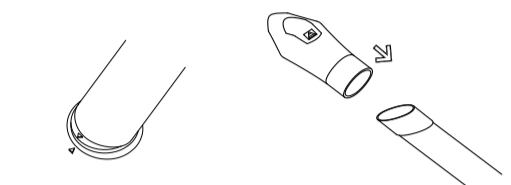


REPLISSAGE D'EAU

1. Retirez le couvercle du haut du vaporisateur.

2. Remplissez le récipient à travers le trou.

Note: Le niveau d'eau doit se trouver entre «MIN» et «MAX» marqués sur le récipient.

3. Remplacez le couvercle en place.

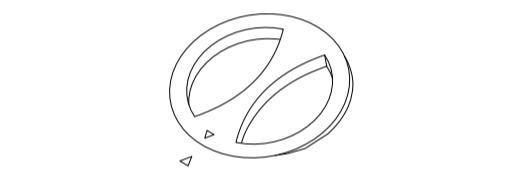

TRAITEMENT AU PARFUM

- Versez un petit peu d'huile essentielle dans le boîtier balsamique de la tête pulvérisatrice.

- 5 pièces en feutre de laine sont livrés pour le remplacement.

AU DÉBUT DU TRAITEMENT

1. Appuyez sur le bouton «POWER»:

- Le chauffage se met en marche.

- Après environ 6 minutes, de la vapeur s'échappera du bec de l'appareil.

2. À partir de ce moment, vous pouvez mettre la fonction «OZONE» en marche:

- La lampe ozone s'allume et se met en marche.

3. Lorsque le niveau d'eau atteint la limite inférieure, éteignez en appuyant sur le bouton «POWER». Retirez le couvercle une fois qu'il n'y a plus de vapeur à s'échapper, ajoutez de l'eau distillée et rallumez l'appareil pour reprendre l'opération.

SUGGESTION DE TRAITEMENT

LES TYPES DE PEAU	DIST.	TEMPS
La peau grasse, une mauvaise circulation sanguine	25 cm	15 min
La peau normale	25cm	10 min
La peau sensible, peau sèche	30cm	5 min
Vase d'expansion capillaire	30cm	5 min

CAUTIONS

- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne pointez pas le bec vers le visage du client jusqu'à ce que de la vapeur s'en échappe continuellement et régulièrement.

- La vapeur doit d'abord atteindre le client par la joue puis le reste du visage.

FAQ

Si l'appareil émet de la vapeur mélangée à de l'eau chaude.

1. Nettoyez le récipient à eau avec du vinaigre et rincez-le à l'eau claire.

2. Remplissez le récipient à eau avec de l'eau claire et ajoutez-y 8 à 10 gouttes de vinaigre. Mettez l'appareil en marche le temps d'un cycle (ne l'utilisez pas avec un patient!)

3. Lorsque le cycle est terminé, éteignez le vaporisateur et rincez le récipient à l'eau claire.

4. Effectuez 2 cycles entiers du vaporisateur en utilisant de l'eau claire.

MAINTENANCE

Il est recommandé de nettoyer votre vaporisateur au moins une fois par semaine et de décalcifier l'élément de chauffage de l'eau. Veuillez suivre les étapes suivantes:

SPÉCIFICATIONS

Régularisations	Limite de hauteur supérieure (cm)	45
	Limite inférieure hauteur (cm)	35
	La rotation du bras	360°
	Rotation de la tête	360°
	L'extension du bras (cm)	16,5

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	30x26x21
	Poids brut (kg)	13,6

Réservoir d'eau	Matériel	Méthacrylate
	Capacité	0,5 litres

Caractéristiques de travail	Temps de préchauffage	6 min. (environ.)
-----------------------------	-----------------------	-------------------

Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	500 W

Parfums	Oui
Ozone	Oui
Dépôt pur les herbes	Non

1. Une fois que le vaporisateur est froid, retirez le récipient à eau.

2. Remplissez le récipient avec la solution appropriée de décalcification ou à base d'eau et laissez-le reposer toute une nuit.

3. Retirez l'eau et rincez à l'eau claire pour évacuer tous les résidus de la solution de décalcification.

4. Remplissez avec de l'eau et effectuez au moins un cycle complet afin de retirer tout résidu de l'appareil de vaporisation.

5. Retirez le récipient et rincez en suivant les étapes précédentes.

6. Remplissez le récipient à nouveau et il peut être utilisé à nouveau.

Note: Si vous ne retirez pas tous les résidus de décalcification, cela peut causer un effet de crachage. Si cela se produit, veuillez répéter la procédure de rinçage et de remplissage jusqu'à ce que le problème soit résolu.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10051	RÉSERVOIR D'EAU
10089	BUSE DE PULVÉRISATION
10090	EXTENSION BRAS 1
10094	EXTENSION BRAS 2